

► MISE EN ROUTE RAPIDE

Masseur de pression d'air Arpège Santé® -
Veino 5



i AVANT UTILISATION


Produit de confort et de bien-être, destiné à la relaxation à domicile.

Ne constitue pas un dispositif médical.

Lire attentivement les consignes de sécurité et contre-indications figurant dans cette notice.

1. INSTALLATION

- Enfilez les bottes sur les jambes, logo vers l'extérieur
- Raccordez les tuyaux d'air à l'unité principale (connecteur à 5 tubes)
- Branchez l'appareil sur une prise électrique conforme

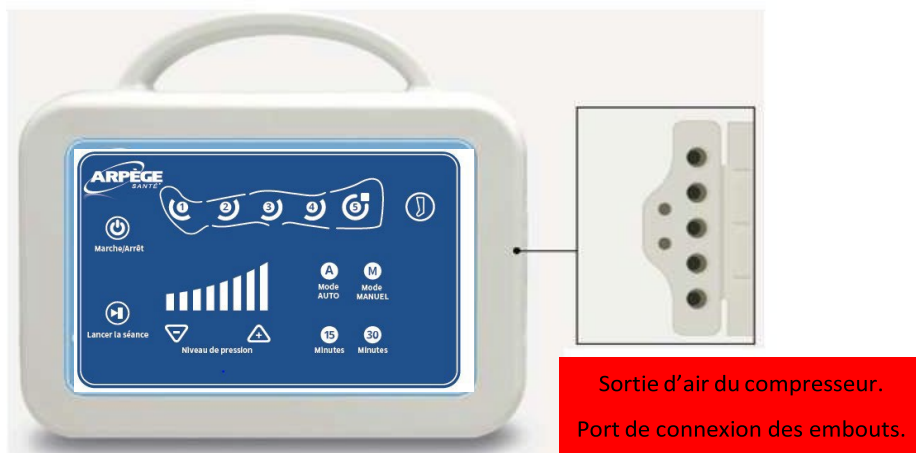

2. Mise sous tension

Appuyez sur Marche / Arrêt

→ un bip retentit, l'appareil s'allume.

3. Choix du mode

Mode Automatique (A)

☞ Séquence de compression prédéfinie, simple et intuitive.

Mode Manuel (M)

☞ Sélection libre des zones à masser (pied, cheville, mollet, genou, cuisse).

4. Réglages

Intensité : choisissez le niveau souhaité (1 à 8) avec + / –

✓ Commencez toujours par une intensité faible.

Durée : 15 ou 30 minutes.

5. Démarrage

- Appuyez sur **Démarrer / Pause** pour lancer la séance.
- Vous pouvez **mettre en pause à tout moment** si besoin.

6. Fin de séance

- L'appareil s'arrête automatiquement en fin de programme.
- Appuyez sur **Marche / Arrêt**, retirez les bottes et débranchez l'appareil.

⚠ Conseils importants

- Ne pas utiliser pendant le sommeil ou sur une peau lésée.
- Ne pas dépasser la durée recommandée.
- Arrêtez immédiatement en cas d'inconfort inhabituel.
- Usage **personnel uniquement** (bottes à utilisateur unique)

